

Vantage Plus Digital

Օֆտալմոսկոպ

ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀՐԱՅԱՆԳՆԵՐ



Keeler
— A world without vision loss —

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

1.	ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ.....	2
2.	ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ	2
2.1	ՆԱԽԱԶԳՈՒԵԱՑՈՒՄՆԵՐ.....	2
2.2	ՀԱՎԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ.....	2
3.	ԲՈՎԱՆԴԱԿԱՑԱՆԿ	2
4.	ՏԵՂԱԿԱՑՈՒՄԸ	2
4.1	ԵՐԱԳՐԱԿԱԶՄԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄԸ.....	3
4.2	ՄԻԱՑՐԵՔ USB ՄԱՆՈՒՄԸ	3
4.3	ՈՒՂԴԵ ԴԻՐԸ.....	3
4.4	ԿԱՐԳԱՔԵՐԵՔ ՏԵՍԱԽՑԻԿԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՄԻԱՑՈՒՄԸ.....	3
4.5	ԿԱՐԳԱՔԵՐԵՔ ԿԻՆԿԵՏՄԱՆ ՈՍՊԱՅԱԿԸ.....	3
4.6	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՀԵՌԱԿՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ	3
4.7	ՏԵՍԱԽՑԻԿԻ ԱՆՁԱՑՈՒՄԸ.....	3
5.	ՊԱՀԵՍԱՄԱՍԵՐ և ԱՔՍԵՍՈՒՄՆԵՐ.....	4
6.	ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՓԱԹԹԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՈՒՏԻԼԻԶԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱՔԵՐՅԱԼ.....	4
7.	ԵՐԱՇԽԻՔ	4

Keeler արտադրության Vantage Plus Digital-ը նախագծվել և ստեղծվել է 93/42/ԵՏՀ հրահանգի, 2017/745 կանոնակարգի (ԵՄ) և ISO 13485 Բժշկական սարքերի որակի կառավարման համակարգերի համաձայն:

Դասակարգում.

ԵՄ. Դաս I

ՄԴՎ. Դաս II

Սույն ձեռնարկում պարունակվող տեղեկատվությունը չպետք է ամբողջությամբ կամ մասամբ վերադարձվի՝ առանց արտադրողի նախնական գրավոր հաստատման: Որպես արտադրանքի շարունակական զարգացման մեր ջաղաքակնություն մաս, միայն մեզ՝ արտադրողին է իրավունք վերապահվում փոփոխություններ կատարել տեխնիկական պայմանների և այս փաստաթուղթում պարունակվող այլ տեղեկատվության մեջ՝ առանց նախնական ծանուցման:

Սույն ՕՀ-ն հասանելի է նաև Keeler UK և Keeler USA կայքերում:

Հեղինակային իրավունք՝ © Keeler ՄՊԸ 2021թ.: Հրապարակված է Մեծ Բրիտանիայում՝ 2021 թ.-ին:

1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Keeler Vantage Plus Digital-ը անուղղակի օֆտալմոսկոպ է, որը նկարում է նկարներն այնպես, ինչպես տեսնում է օգտագործողը՝ հիմնականում ուսուցողական նպատակներով:



Keeler-ը խորհուրդ չի տալիս թվային տվյալների օգտագործումը ախտորոշման նպատակների համար:

2. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ

2.1 ՆԱԽԱԶԳՈՒԵԱՑՈՒՄՆԵՐ

Խնդրում ենք հաշվի առնել, որ մեր սարքերի պատշաճ և անվտանգ աշխատանքը երաշխավորվում է միայն այն դեպքում, երբ սարքերն ու դրանց լրացուցիչ մասերը/աքսեսուարները ձեռք են բերվում բացառապես Keeler ՄԴԸ-ից: Այլ պարագաների օգտագործումը կարող է առաջացնել սարքի բարձր էլեկտրամագնիսական արտանետումներ կամ ցածր էլեկտրամագնիսական դիմադրողականություն և հանգեցնել դրա սխալ աշխատանքի:

Սարքի անվտանգ գործարկումն ապահովելու համար ծանոթացեք հետևյալ ցուցումների հետ:



- Չփոփոխեք սարքի կառուցվածքը:



- Տեսախցիկը պետք է կապակցված լինի ԱՀ-ին, որը կհամապատասխանի էլեկտրական սարքերի անվտանգության (բժշկական) EN/IEC 60601-1 ստանդարտին:
- ՆՇՈՒՄ՝ Օգտագործման հրահանգների այս փաստաթղթին հարկավոր է ծանոթանալ Vantage Plus-ի և Vantage Plus LED-ի անուղղակի օֆտալմոսկոպների համար նախատեսված օգտագործման հրահանգների փաստաթղթի (մասի համար EP59-19017) հետ միասին:

2.2 ՀԱԿԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Մինչ BIO-ն՝ գլխին ամրացվող սարքի միջոցով կարող է իրականացվել չլայնացրած բիբի միջոցով, տեսադաշտը և խոշորացումը կարող են զգալիորեն վնասվել. ուստի, գործնականում խորհուրդ է տրվում կիրառել բիբի լայնացում միդրիատիկի միջոցով: Օպտիկայի մասնագետներն աչքի առողջական վիճակի համապարփակ հետազոտության շրջանակներում պարբերաբար կատարում են բիբի լայնացում՝ աչքի հատակը համապարփակ ուսումնասիրելու համար՝ կլինիկական ցուցումների առկայության դեպքում: Բացի այդ, ցանցաթաղանթի ավելի ծայրամասային պատկերը ստանալու համար, գլխին ամրացվող սարքն օգտագործելիս կատարվում է սկլերայի սեղմում, որպես BIO-ի հավելում:

3. ԲՈՎԱՆԱԿԱՑԱՆԿ

- Vantage Plus բինակուլյար անուղղակի օֆտալմոսկոպ
- Vantage Plus-ի հրահանգներ
- Ծրագրակազմի սարքավար և հավելված
- USB մալուխ (5 մ)

4. ՏԵՂԱԿԱՑՈՒՄԸ

Տեղակայեք Vantage Plus Digital-ը, ինչպես սովորական ձևով կտեղակայեիք ձեր անուղղակի սարքը: Սարքը պետք է տեղակայվի նախքան հետազոտության պրոցեդուրաները սկսելը:

4.1 ԾՐԱԳՐԱԿԱԶՄԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄԸ

Անդրադարձեք Ծրագրակազմի տեղակայման և սկսնակի համառոտ ուղեցույցին
- EP59-09871:

4.2 ՄԻԱՑՐԵՔ USB ՄԱՆՈՒՄԸ

Ծրագրակազմը տեղադրելուց հետո միացրեք մալուխը մինի USB միացքին:

Միացրեք USB մալուխը ձեր համակարգչին




USB միացքին միացնող մալուխը

4.3 ՈՒՐԴԵՔ ԴԻՐՔԸ


Տեղադրեք ձեր գլխին և հարմարացրեք, ինչպես սովորական հետազոտության ժամանակ:

4.4 ԿԱՐԳԱԲԵՐԵՔ ՏԵՍԱԽՑԻԿԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՄԻԱՑՈՒՄԸ

Պտտեք պտտիչը և կարգաբերեք տեսախցիկի ժամանակավոր միացումը Եկրանին:

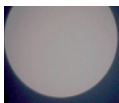



Չափազանց բարձր
Եկրանին

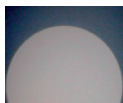

Չափազանց ցածր
Եկրանին



Կենտրոնաբերված
Եկրանին

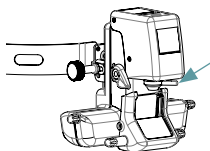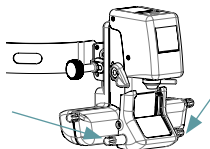


4.5 ԿԱՐԳԱԲԵՐԵՔ ԿԻՉԱԿԵՏՄԱՆ ՈՍՊԵՅԱԿԸ


Պտտեք կիզակետման կարգաբերման լծակը և կարգաբերեք ոսպնյակի կիզակետումը:

4.6 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Աշխատանքային հեռավորությունը փոփոխվում է 300-600 մմ հիվանդի աչքի առջևի մասից մինչև 20D ոսպնյակով գործիքի առջևի մասը:

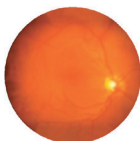

Ցանցաթաղանթի
պատկերը կիզակետից
դուրս

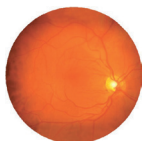

Ցանցաթաղանթի
պատկերը կիզակետի մեջ

Եթե Եկրանի վրայի նկարը կիզակետից դուրս է, դուք պետք է օպտիկան տեղաշարժեք առաջ և/կամ հետ, մինչև այն կիզակետման մեջ լինի:

4.7 ՏԵՍԱԽՑԻԿԻ ԱՆՋԱՏՈՒՄԸ

Տեսախցիկն անջատելու համար հանեք USB մալուխը:

5. ՊԱՅԵՍԱՄԱՍԵՐ և ԱԶՍԵՍՈՒՄՐՆԵՐ

Տարր	Մասի համար
Vantage Plus Digital-ի ոտնակավոր անջատիչ	1205-P-7001
Բինոկուլյար անուղղակի դեմքի պաշտպանիչ վահանակ	1205-P-7034
Volk 20D սև խտացնող ոսպնյակ	2105-K-1159
Vantage Plus Digital-ի տեղափոխման պատյան	EP79-43643 / EP19-43108

6. ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՈՒՏԻԼԻԶԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Հին էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումների ուտիլիզացում



Ապրանքի կամ դրա փաթեթավորման վրա նշված այս խորհրդանիշը և հրահանգները ցույց են տալիս, որ այս ապրանքը չպետք է դիտարկվի որպես կենցաղային թափոն:

Խրախուսվում է, որպեսզի այս սարքավորումներն իրենց ծառայելու ժամկետի ավարտին վերամշակվեն և վերաօգտագործվեն՝ հետապնդելով շրջակա միջավայրի վրա ԷԵՍԹ-ի (Էլեկտրական էլեկտրոնային սարքավորումների թափոններ) ազդեցության և աղբավայրեր մտնող ԷԵՍԹ ծավալի նվազեցման նպատակը:

Եթե ձեզ ավելի շատ տեղեկատվություն է անհրաժեշտ հավաքածուի վերաօգտագործման և վերամշակման վերաբերյալ, ապա կապվեք B2B համապատասխանության հետ՝ 01691 676124 (+44 1691 676124) հեռախոսահամարով: (Միայն Մեծ Բրիտանիայում):

Սարքի հետ կապված ցանկացած լուրջ միջադեպ պետք է հաղորդվի արտադրողին և ձեր անդամ պետության իրավասու մարմնին:

7. ԵՐԱՇԽԻԸ

Keeler արտադրության Vantage Plus Digital-ին տրամադրվում է երեք տարվա երաշխիք՝ թերի արտադրական մասերի կամ գործարանային կոմպլեկտավորման համար: Երաշխիքը կատարվում է դեպի բազա վերադարձի հիմունքներով (ԲՎՀ)՝ հաճախորդի հաշվին, և կարող է անվավեր դառնալ, եթե ճեղքային լամպը պարբերաբար չի սպասարկվել:

Արտադրողի երաշխիքն ու պայմանները մանրամասն ներկայացված են Keeler UK կայքում:

Հայելին, հիմնական լուսավորության լամպն ու ընդհանուր «մաշվածությունը» բացառվում են մեր ստանդարտ երաշխիքից:



Արտադրողը մերժում է ցանկացած պատասխանատվություն և երաշխիքային պարտավորություններ, եթե սարքը որևէ ձևով խափանվում է կամ պարբերական սպասարկումը բաց է թողնվում կամ կատարվում է այնպես, որ չի համապատասխանում արտադրողի այս հրահանգներին:

Այս սարքում օգտագործողի կողմից սպասարկվող մասեր չկան: Ցանկացած սպասարկում կամ վերանորոգում պետք է իրականացվի միայն Keeler ՍՊԸ-ի կամ պատշաճ կերպով վերապատրաստված և լիազորված դիստրիբյուտորների կողմից: Սպասարկման ձեռնարկները հասանելի կլինեն Keeler-ի լիազորված սպասարկման կենտրոնների և Keeler-ի կողմից վերապատրաստված սպասարկող անձնակազմի համար:

Կոնտակտային տվյալներ



Արտադրող

Keeler Լիմիթիդ
Քլեվեր Յիլ Ռոուդ



Ուկինգտոն

Բերքշիր

SL4 4AA Մեծ Բրիտանիա

Անվճար հեռախոսահամար՝ 0800 521251

Հեռ.՝ +44 (0) 1753 857177

Ֆաքս՝ +44 (0) 1753 827145

ԱՄՆ վաճառքի գրասենյակ

Keeler ԱՄՆ

Ֆենիքսվիլ Փայկ, 3222

Շենք թիվ 50

Մայվերն, ՊԱ 19355 ԱՄՆ

Անվճար հեռախոսահամար՝ 1 800 523 5620

Հեռ.՝ 1 610 353 4350

Ֆաքս՝ 1 610 353 7814

Հնդկաստանի գրասենյակ

Keeler Հնդկաստան

Հալմա Ինդիա Պվտ. Ltd./ՍՊԸ

Հոդվածա՝ A0147, ճանապարհ՝ 24

Վեյջլ արտադրական կոմպլեքս

Թեյն Ուենթ - 400604, Մահարաշտրա

ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ

Հեռ.՝ +91 22 4124 8001

Չինաստանի գրասենյակ

Հալմա Չայնա Գրուպ

名称: 沃迈 (上海) 机电有限公司

地址: 上海市闵行区金都路1165弄

123号23幢一号厂房三层B座

电话: 021-6151 9025



Վիզիոմետրիկա, Ս. Լ., Վիկյալ, 131
08221 Տերրասա, Իսպանիա

EP59-09863 – թողարկում Ը

Թողարկման ամսաթիվ՝ 12/05/2021



Keeler
– A world without vision loss –